


# Guide de référence rapide

Ce guide de référence rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation.

## Démarrage d'un enregistrement

Appuyez sur le bouton d'alimentation.

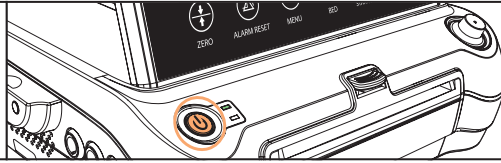

Appuyez sur la touche « START/STOP » quelques secondes pour démarrer et arrêter ou mettre en pause les enregistrements.

Appuyez sur la touche « PRINT » pour démarrer et arrêter l'impression. L'impression rétrospective est possible.





Appuyer sur la touche « ALARM RESET » pour confirmer les alarmes en cours.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche « MENU » pendant quelques secondes pour verrouiller/déverrouiller l'écran tactile.

## Enregistrement externe - TOCO

Placez le capteur TOCO au-dessus du fond utérin.

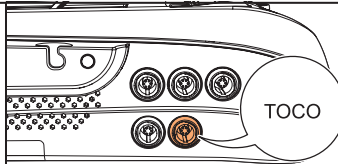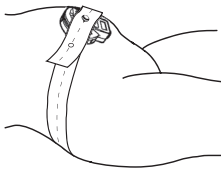



Connectez le capteur TOCO au SRF618 B6.




Pour réinitialiser le signal TOCO, appuyez sur la touche tactile « ZERO » entre les contractions.

## Enregistrement externe - Capteur ultrasons

Appliquez du gel sur le capteur ultrasons.

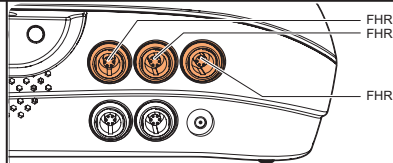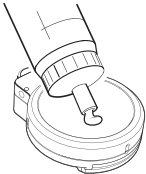



Connectez les capteurs ultrasons au SRF618 B6.

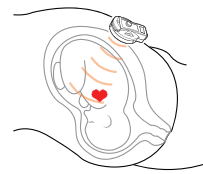


Placez le capteur sur l'abdomen de la parturiente.

## Marqueur d'évènements

Marqueur d'évènements câblé.

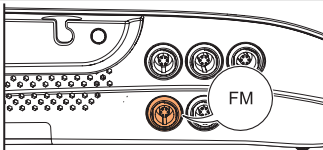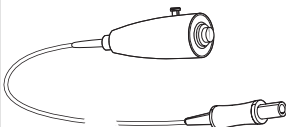

Connectez le marqueur d'évènements câblé au SRF618 B6.

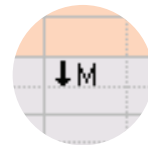

Détection automatique des mouvements du fœtus à l'écran

# Utilisation de l'appareil

Ouverture du journal des événements

Bouton de menu Outils

Menu des réglages rapides

Faire défiler la fenêtre CTG

Réglages rapides. Les réglages réalisés dans la boîte de dialogue des réglages rapides s'appliquent uniquement à l'enregistrement actuel.

Appuyez sur la touche tactile « BED ». L'écran des réglages rapides s'affiche.

OU

Sélectionnez le « Menu des réglages rapides ».

Accès aux paramètres à l'aide du menu « Outils ».

Fenêtre Journal des événements. Examiner le journal des événements et faire des annotations.

Pour consulter les scores de l'analyse CTG automatique, appuyez sur « Score de l'analyse » dans le menu Outils.

| Heure de début | Intervalle | VCT (no) | Score |
|----------------|------------|----------|-------|
| 8:50 - 9:06    |            |          | 9.77  |
| 8:50 - 9:09    |            |          | 9.77  |
| 8:50 - 9:02    |            |          | 9.77  |
| 8:50 - 9:06    |            |          | 9.77  |

Pour entrer les informations patient, appuyez sur « Informations patient » dans le menu Outils.



**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 République populaire de Chine, Code postal : 510520  
 Tél. : +86-20-87036513  
 Site Web : www.sunray.cn

**Ventes, service et support technique**  
**Neoventa Medical AB**  
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Suède  
 Tél. : +46 31 758 32 00  
 Site Web : www.neoventa.com  
**Support technique**  
 Tél. : +46 31 758 32 12  
 E-mail : ts@neoventa.com

