


# Quick Guide

Denna Quick Guide ersätter inte bruksanvisningen.

## Starta en registrering

Tryck in strömknappen.

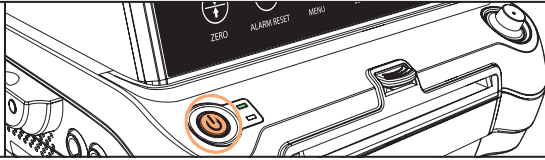

Tryck och håll in touchtangenten "START/STOP" för att starta, avsluta och pausa registreringar.

Tryck på knappen "PRINT" för att starta och avsluta utskrift. Retrospektiv utskrift är möjlig.



ZERO



ALARM RESET



MENU



BED



START/STOP





PRINT

Tryck på knappen "ALARM RESET" för att bekräfta pågående larm.

Tryck in och håll ned knappen "MENU" i några sekunder för att låsa/låsa upp pekskärmen.

## Extern registrering - TOKO

Placera TOKO-givaren över fundus.

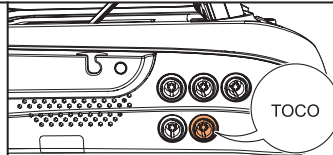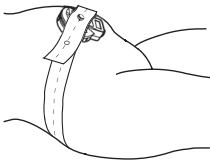


Anslut TOKO-givaren till SRF618 B6.




För att nollställa TOKO-signalen, tryck touchtangenten "ZERO" mellan kontraktionerna.

## Extern registrering - Ultraljud

Applicera ultraljudsgel på ultraljudsgivaren.

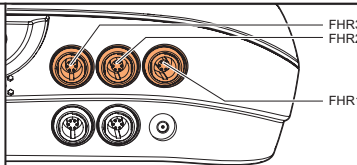



Anslut ultraljudsgivaren till SRF618 B6.

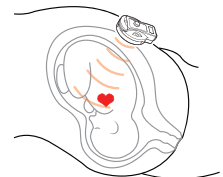


Placera givaren på mammans buk.

## Fosterrörelsemärk

Trådbunden fosterrörelsemärk.

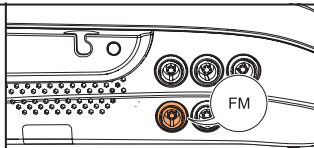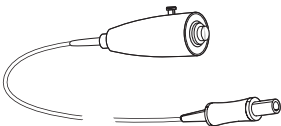


Anslut den trådbundna fosterrörelsemärket till SRF618 B6.

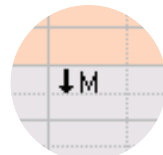

Fosterrörelsemärket på skärmen.


# Användning av enheten

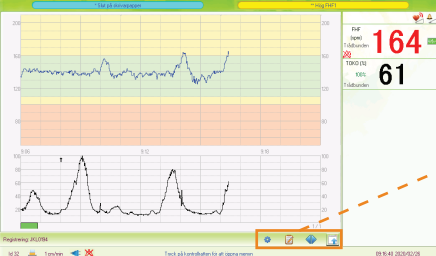

Öppna händelseloggen      Verktöymeny-knapp

Åtkomst till snabbinställningsmenyn      Bläddra i CTG-fönstret


**Snabbinställningar.** Inställningarna som görs i dialogrutan för snabbinställningar gäller endast den aktuella registreringen.

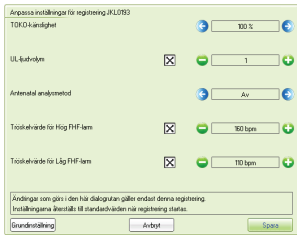


Tryck på touch tangenten "BED". Skärmen för snabbinställningar visas.

ELLER


Välj "snabbinställningsmenyn"




Åtkomst till inställningar med hjälp av verktygsmenyn.




Händelseloggens fönster, för att lägga till och granska alarm och notat.

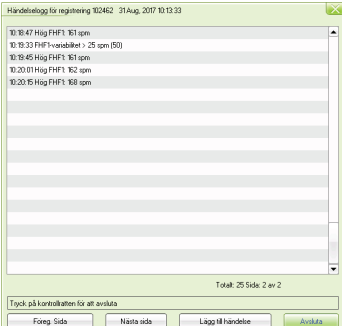

För att granska resultat av automatiserad CTG-analys, tryck på "Analysresultat" i verktygsfältet.

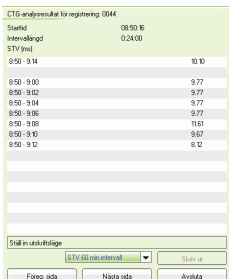

För att mata in patientinformation, tryck på "Patientinformation" i verktygsfältet.




**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 Folkrepubliken Kina, Postnummer: 510520  
 Tfn: +86-20-87036513  
 Webbplats: www.sunray.cn

**Försäljning, service och support**, **Neoventa Medical AB**  
 Norra Ägatan 32, 431 35 Mölndal, Sverige  
 Tfn: +46 31 758 32 00  
 Webbplats: www.neoventa.com  
**Teknisk support**  
 Tfn: +46 31 758 32 12  
 E-post: ts@neoventa.com

