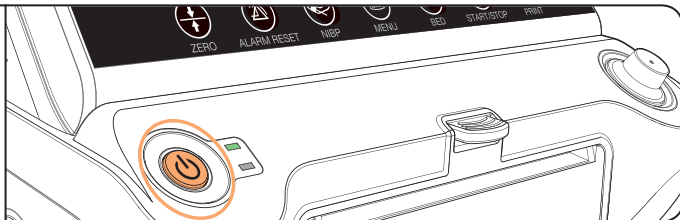


Stručná příručka

Tato stručná příručka nenahrazuje pokyny pro použití.

Spuštění záznamu

Stiskněte tlačítko napájení.



Stisknutím a podržením tlačítka „START / STOP“ zahájíte a zastavíte nebo pozastavíte nahrávání.

Stisknutím tlačítka „PRINT“ spustíte a zastavíte tisk. Je možné tisknout zpětně.



ZERO



ALARM RESET



NIBP



MENU



BED



START/STOP



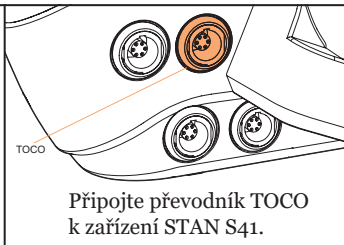
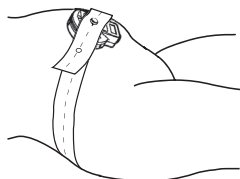
PRINT

Stiskem tlačítka „ALARM RESET“ potvrďte aktuální alamy.

Podržením tlačítka „MENU“ na několik sekund zámkně/odemkně dotykovou obrazovku.

Externí záznam – TOCO

Umístěte převodník TOCO nad dno dělohy.



Připojte převodník TOCO k zařízení STAN S4I.



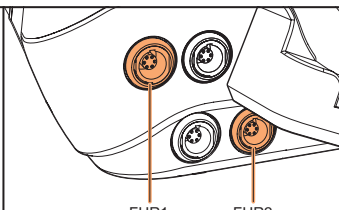
ZERO

Pokud chcete vynulovat signál TOCO, stiskněte mezi kontrakcemi dotykové tlačítko „ZERO“.

Externí záznam – ultrazvuk




Na ultrazvukový převodník naneste ultrazvukový gel.



FHR1

FHR2

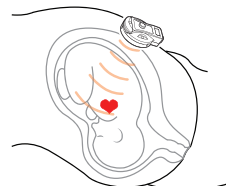
Připojte ultrazvukový převodník k zařízení STAN S4I.




Umístěte převodník na břicho matky.


Interní záznam – EKG plodu (FEKG)

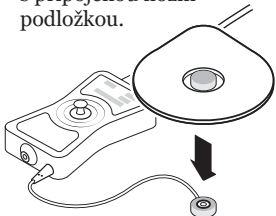Připravte pokožku a aplikujte kožní elektrodu s připojenou nožní podložkou.



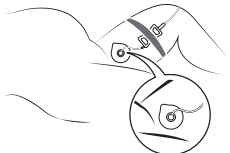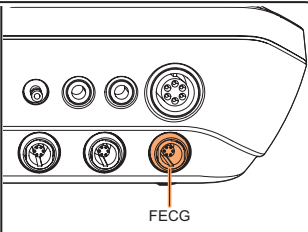Nožní podložku umístíte do blízkosti tříselného kanálu. Aplikujte skalповou elektrodu plodu podle pokynů výrobce.






FEKG

Připojte konektor FEKG k zařízení STAN S41.

Analýza ST


Událost ST

BIPH




Poměry TQR/S

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

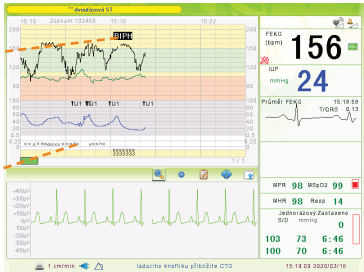


Průměr FEKG


Průměr FEKG 15:18:58
T/QRS 0.13



Značkováč pohybů plodu

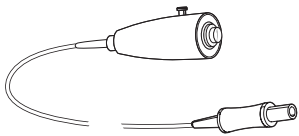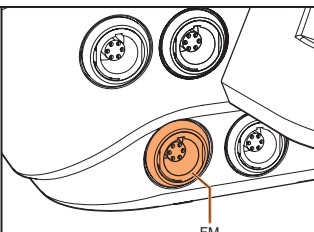
Pevný značkováč pohybů plodu





FM

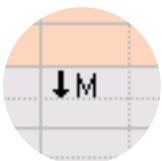
Připojte pevný značkováč pohybů plodu k zařízení STAN S41.




Značka pohybů plodu na obrazovce

Parametry matky – MSpO₂

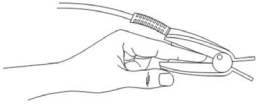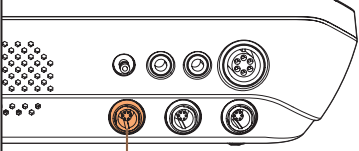Přípevněte senzor MSpO₂ na ukazováček pacientky tak, aby značka nehtu byla na straně s nehtem.






SpO₂


Připojte SpO₂ k zařízení STAN S41.


Hodnoty MPR a MSpO₂.

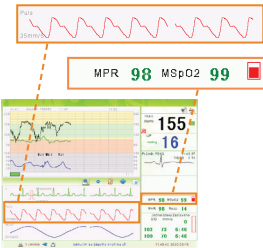MPR 98 MSpO₂ 99




Parametry matky – NIBP



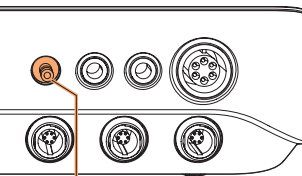


NIBP

Připojte manžetu NIBP
k zařízení STAN S41.




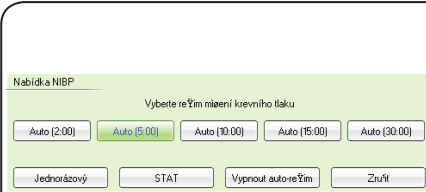Stisknutím dotykového
tlačítka NIBP spustíte
měření.




Vybete režim měření krevního tlaku

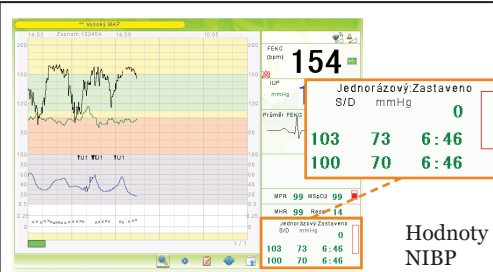
Zvolte požadovaný režim měření
z rozevírací nabídky.




Hodnoty
NIBP

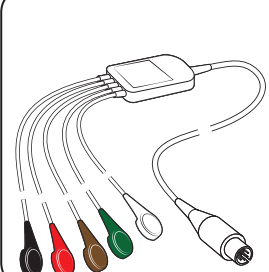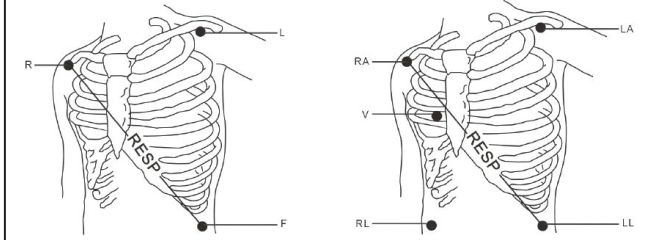Parametry matky – EKG a dechová frekvence matky






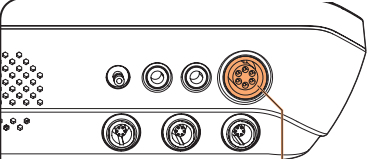Umístění elektrod pro režim se 3 nebo 5 dráty elektrod




Připojte kabel s dráty elektrod
MEKG ke konektoru EKG
hlavní jednotky.

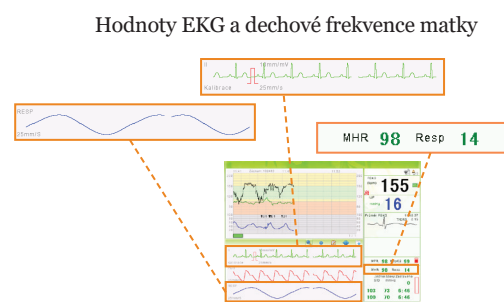Hodnoty EKG a dechové frekvence matky



Používání zařízení

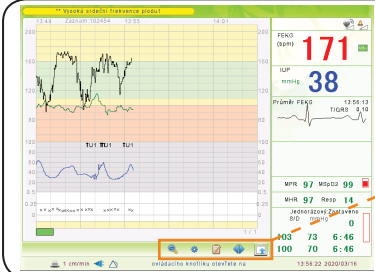

Změna režimu zobrazení


Otevření knihovny událostí

Tlačítko nabídky nástrojů

Nabídka rychlého nastavení

Posun okna s křivkou CTG

Rychlé nastavení. Nastavení provedená v dialogovém okně rychlého nastavení platí pouze pro stávající záznam.

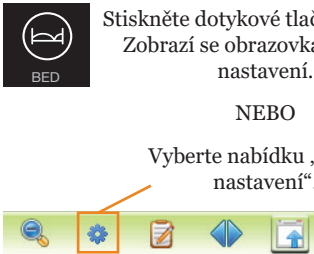


Stiskněte dotykové tlačítko „BED“.

Zobrazí se obrazovka rychlého nastavení.


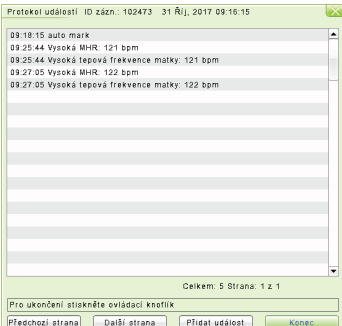
NEBO

Vyberte nabídku „Rychlé nastavení“.

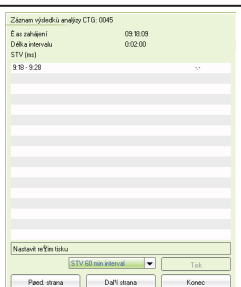


Otevřete nastavení pomocí nabídky „Nástroje“.


Okno knihovny událostí. Umožňuje přidávat a kontrolovat poznámky a okolnosti varovného hlášení.

Pokud chcete kontrolovat výsledky automatické analýzy CTG, stiskněte tlačítko „Výsledek analýzy“ v nabídce nástrojů.



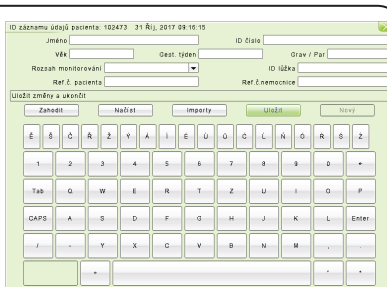Pokud chcete zadat informace o pacientce, stiskněte tlačítko „Informace o pacientce“ v nabídce nástrojů.




Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.
 38 Gaokou Road, Gaotang Industry District,
 GuangShanEr Road, Kanton,
 Čínská lidová republika, PSČ: 510520
 Tel: +86-20-87036513
 Webové stránky: www.sunray.cn

Prodej, servis a podpora **Neoventa Medical AB**
 Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal, Švédsko
 Tel: +46 31 758 32 00
 Web: www.neoventa.com
Technická podpora
 Tel: +46 31 758 32 12
 E-mail: ts@neoventa.com



Stručná příručka k zařízení STAN S41 – P2263-11094
 Rev. CE1.4 – Smět 2019

