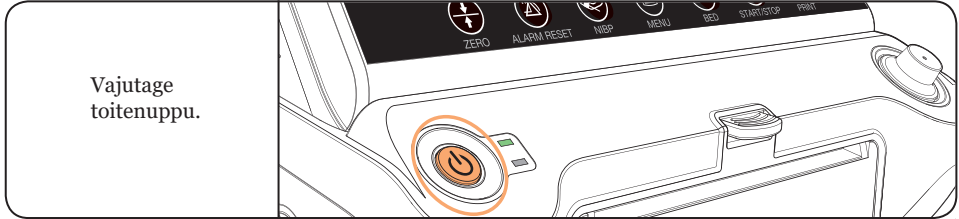


## Kiirjuhend

Kiirjuhend ei asenda kasutusjuhendit.

### Salvestamise alustamine



Et alustada või võpetada või peatada salvestamist, vajutage ja hoidke nuppu START/STOP.

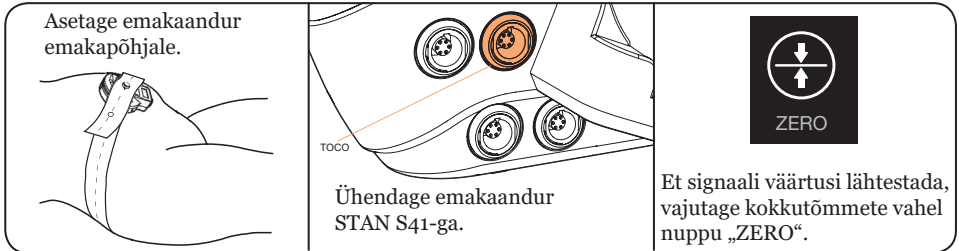
Et alustada või lõpetada printimist, vajutage nuppu „PRINT“. Printida on võimalik ka tagasiulatuvalt.




Aktiivsete alarmide kinnitamiseks vajutage nuppu „ALARM RESET“.

Puutekraani lukustamiseks/avamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit nuppu „MENU“.

### Kaudne salvestamine – KTG




### Kaudne salvestamine – ultraheli

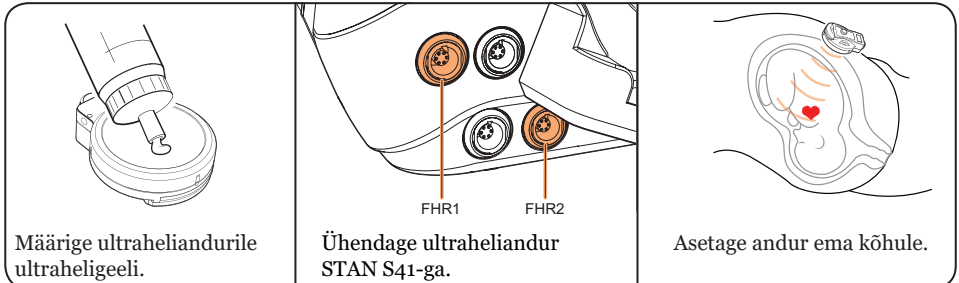



## Otsene jälgimine – loote EKG

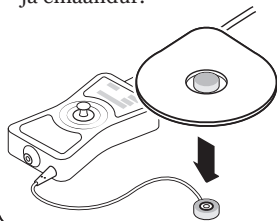Valmistage nahapinnad ette ning paigaldage looteandur ja emaanur.



Paigaldage emaanur kubemekanali lähedale.

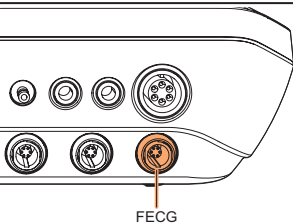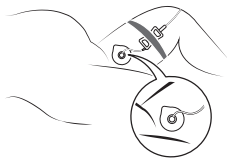Paigaldage loote peanahaandur vastavalt tootja juhisteile.



FECG



Ühendage loote EKG andur STAN S41-ga.

## ST-analüüs

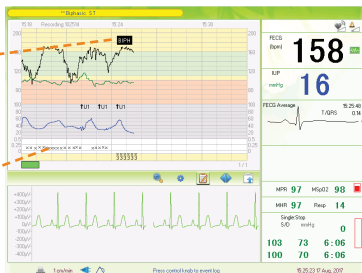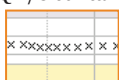ST-sündmus



TQR/S suhtarvud





Loote EKG keskmine




## Loote liigutuste nupp

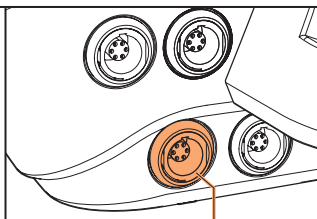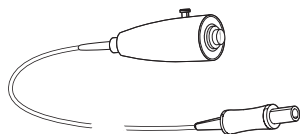Juhtmega nupp loote liigutuste märkimiseks.





Ühendage juhtmega nupp STAN S41-ga.

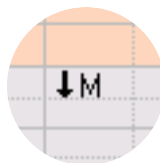

Loote liigutuse sümbol kuvaril.



## Ema näitajad – ema SpO2

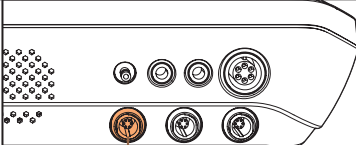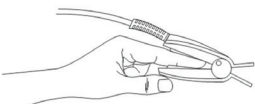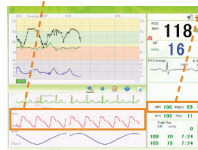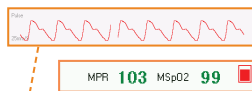Paigaldage ema SpO2 andur patsiendi nimetissõrmel nii, et küünt tähistav märgis oleks küüne poole.




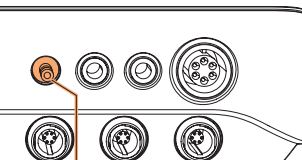
Ühendage SpO2-andur STAN S41-ga.

Ema puls ja SpO2.




## Ema näitajad – kaudne vererõhk



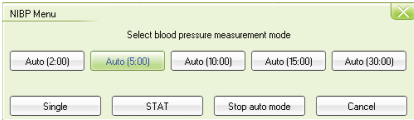


NIBP


Ühendage vererõhumansett STAN S41-ga.



Et alustada mõõtmist, vajutage puutenuppu NIBP.




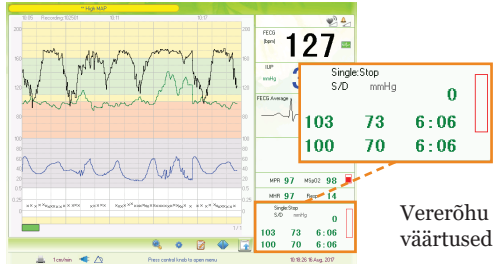
Valige hüpikmenüüst soovitud mõõtmisviis.




Vererõhu väärtused.

## Ema näitajad – ema EKG ja hingamissagedus

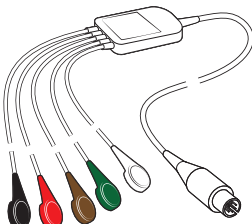

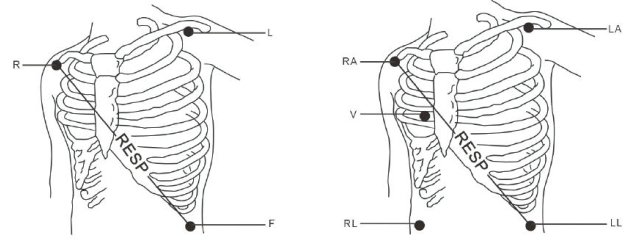


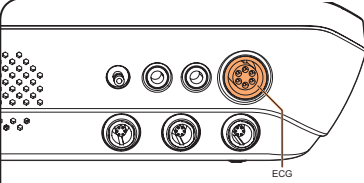Elektroodide paigutus kolme ja viie klemmi puhul.




Ühendage ema EKG-kaabel seadme EKG-pesasse.

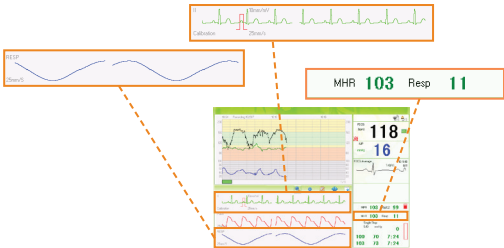Ema EKG ja hingamissageduse väärtused.




# Seadme kasutamine

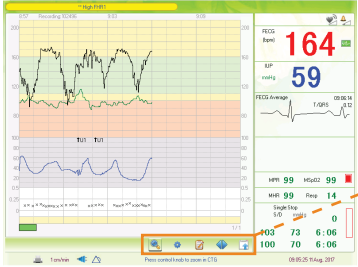


Vaatamisrežiimi muutmine      Sündmuste logi avamine      Seadete menüü

Kiirseadistuse menüü      Kardiogrammi aknas liikumine

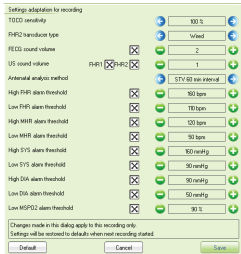Kiirseadistus. Kiirseadistuses tehtud muudatused puudutavad ainult käesolevat salvestust.





Puuduta "BED" puutenuppu. VÕI Vali "Kiirseadistuse menüü".





Seadeid saab muuta seadete menüüs.

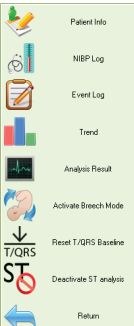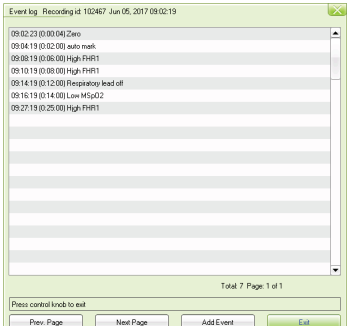Sündmuste logi aken. Et lisada ja vaadata üle alarmide tingimusi märkusi.

Et vaadata automaatse KTG-analüüsi tulemusi, vajutage seadete menüüs „Analysis Results“.

Et sisestada patsiendi teavet, vajutage seadete menüüs „Patient“.

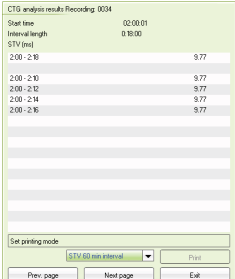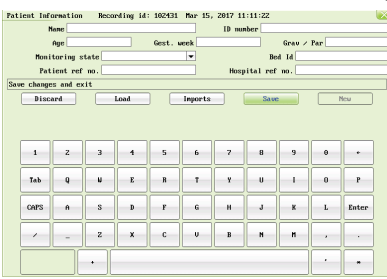
**Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.**  
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,  
 GuangShanEr Road, Guangzhou,  
 Hiina Rahvabariik, Postiindeks: 510520  
 Telefon: +86-20-87036513  
 Koduleht: www.sunray.cn

**Müügi-, teenindus-, ja tugiosakond**

**Neoventa Medical AB**  
 Norra Ägatan 32, 431 35 Mölndal, Rootsi  
 Telefon: +46 31 758 3200  
 Koduleht: www.neoventa.com  
**Tehniline tugi**  
 Telefon: +46 31 758 3212  
 E-post: ts@neoventa.com

