

Guida rapida

Questa guida rapida non sostituisce le istruzioni per l'uso.

Avvio di una registrazione



Tenere premuto il tasto "START/STOP" per avviare, interrompere o sospendere registrazioni. Premere il tasto "PRINT" per avviare o interrompere la stampa. È possibile la stampa retrospettiva.

Premere il tasto "ALARM RESET" per confermare gli allarmi in corso. Premere e tenere premuto il tasto "MENU" per alcuni secondi per bloccare/sbloccare il touch screen.

Registrazione esterna - TOCO

Posizionare il trasduttore TOCO in corrispondenza del fondo uterino.

Collegare il trasduttore TOCO al monitor STAN S41.

Per azzerare il segnale TOCO, premere il tasto a sfioramento "ZERO" tra una contrazione e l'altra.

Registrazione esterna - Ultrasuoni


Applicare l'apposito gel al trasduttore a ultrasuoni.

Collegare i trasduttori a ultrasuoni al monitor STAN S41.

Posizionare il trasduttore sull'addome materno.


Registrazione interna - ECG fetale (FECG)


Preparare la cute e applicare l'elettrodo cutaneo, con il connettore per la gamba collegato.

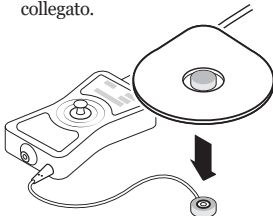

Posizionare il connettore per la gamba in prossimità del canale inguinale.

Applicare l'elettrodo per scalpo fetale secondo le istruzioni del produttore.

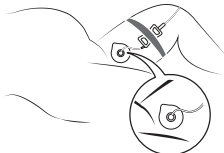

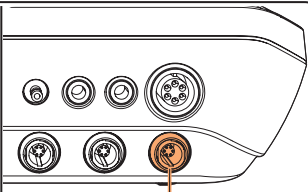


FECG


Collegare il connettore FECG al monitor STAN S41.


Analisi ST

Evento ST

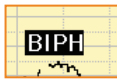


Rapporti TQR/S

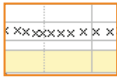

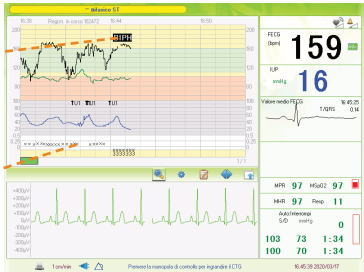


Valore medio FECG




Valore medio FECG T/ORS 16:45:25
0.14

Marcatore dei movimenti fetali


Marcatore dei movimenti fetali con fili.

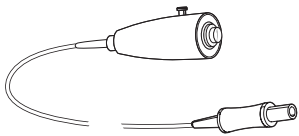

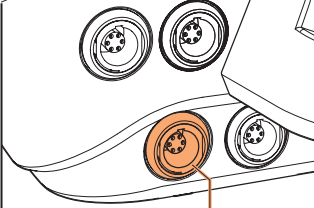

FM


Collegare il marcatore dei movimenti fetali con fili al monitor STAN S41.

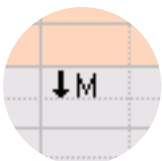


Indicazione del movimento fetale sullo schermo.

Parametri materni - MSpO2

Applicare il sensore MSpO2 con l'indicatore dell'unghia rivolto verso l'unghia.

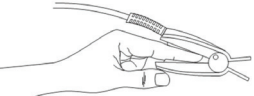


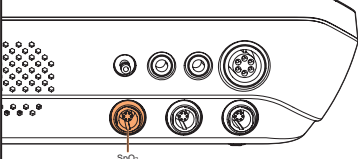

SpO2

Collegare il trasduttore SpO2 al monitor STAN S41.


Valori MPR e MSpO2.

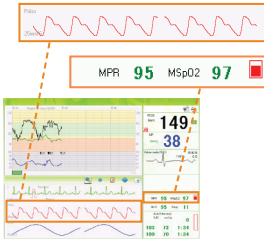


MPR 95 MSpO2 97

149
38


Parametri materni - NIBP

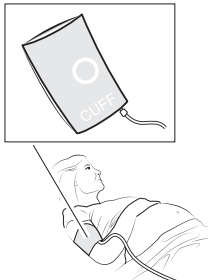

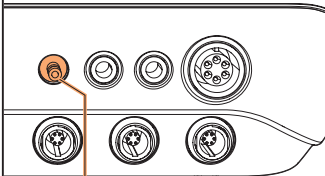

NIBP

Collegare il bracciale NIBP al monitor STAN S41.



NIBP

Premere il tasto a sfioramento NIBP per avviare la misurazione.


Menu NIBP

Selezionare la modalità di misurazione della pressione arteriosa

Auto (2:00) **Auto (5:00)** Auto (10:00) Auto (15:00) Auto (30:00)


Singola STAT Interrompi modalità auto Annulla


Selezionare la modalità di misurazione desiderata nel menu a comparsa.

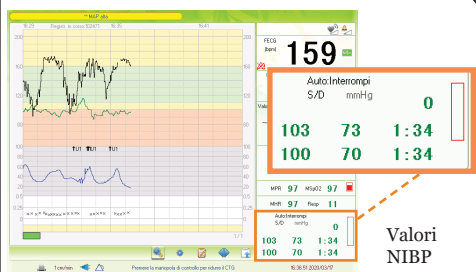


Valori NIBP

Parametri materni - MECG e frequenza respiratoria

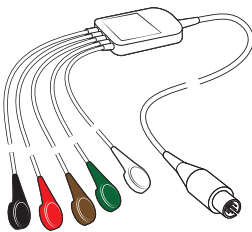

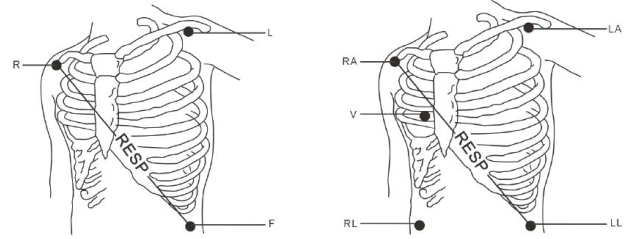


Posizionamento degli elettrodi per la modalità Resp a 3 e a 5 derivazioni.

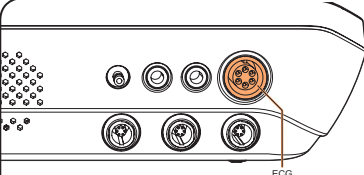

ECG

Collegare il cavo delle derivazioni MECG al connettore ECG dell'unità principale.

Valori di MECG e frequenza respiratoria.

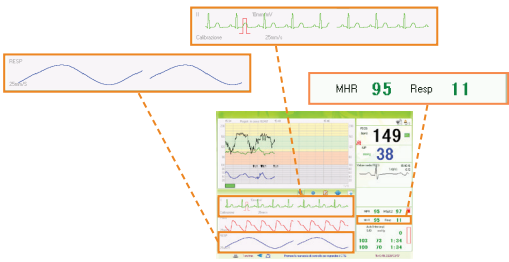

Utilizzo del dispositivo

Modifica della modalità di visualizzazione

Apertura del registro degli eventi

Pulsante del menu Strumenti

Menu delle impostazioni rapide

Scorrimento della finestra CTG

Impostazioni rapide. Le impostazioni eseguite nella finestra di dialogo delle impostazioni rapide sono applicate solo alla registrazione corrente.

PREMERE IL TASTO A SFIORAMENTO "BED". VIENE VISUALIZZATA LA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI RAPIDE.

O

Selezionare "Menu impostazioni rapide".

Accedere alle impostazioni utilizzando il menu "Strumenti".

Finestra del registro degli eventi. Per aggiungere ed esaminare le condizioni di allarme e le annotazioni.

Per esaminare i risultati dell'analisi CTG automatica, premere "Risultato analisi" nel menu Strumenti.

Per immettere le informazioni sulla paziente, premere "Informazioni sulla paziente" nel menu Strumenti.



Guangzhou Sunray Medical Apparatus Co., Ltd.
 38 Gaoke Road, Gaotang Industry District,
 GuangShanEr Road, Guangzhou,
 Repubblica Popolare Cinese, Codice postale: 510520
 Tel: +86-20-87036513
 Sito web: www.sunray.cn

Supporto, Assistenza e Vendite

Neoventa Medical AB
 Norra Ägatan 32, 431 35 Mölndal, Svezia
 Tel: +46 31 758 32 00
 Sito Internet: www.neoventa.com
Assistenza tecnica
 Tel: +46 31 758 32 12
 E-mail: ts@neoventa.com

